



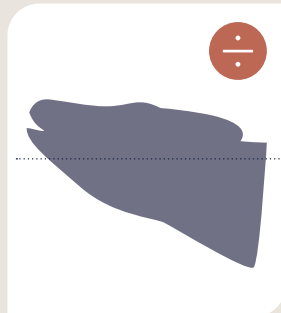

Brug af sonde til kalve

Før du går i gang

- Sørg for, at kalven står oprejst og er godt fastholdt. Brug begge hænder til at håndtere kalven. Hvis den ikke kan stå, skal den placeres liggende på brystet.
- Hold kalvens hoved i naturlig position – næsen skal være under ørerne.
- Mål sonden, inden du starter. Sondens længde skal svare til længden fra kalvens næse til skulder.

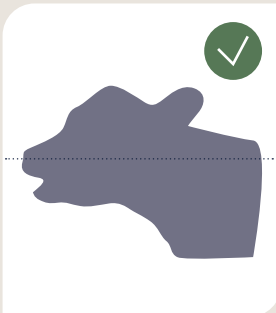


Vigtigt at undgå

- Løft ikke kalvens hoved under indføring af sonden.
- Pres aldrig sonden ned med kraft.
- Træk ikke sonden ud, før der er lukket for slangen.
- Overfyld ikke kalven – der må ikke komme væske op i munden.
- Lad ikke sonden røre gulv, beskidte hænder eller gødning.
- Brug ikke samme sonde til flere kalve uden grundig rengøring.
- Brug forskellige sonder til syge og nyfødte kalve.
- Giv aldrig mælk med sonde (medmindre det er råmælk til en nyfødt kalv, som ikke selv kan drikke)
- Brug ikke en beskadiget sonde med ridser eller bidemærker.

Sådan lægger du sonden korrekt

1. Før sonden ind fra venstre side af munden og hen over tungen.
 2. Arbejd roligt og forsigtigt – brug aldrig kræfter.
 3. Mærk på venstre side af halsen på kalven, mens sonden føres ned i spiserøret:
- Du skal kunne mærke to rør:
 - lufrøret (med tydelige ringe)
 - spiserøret med sonden
 - Hvis du kun kan mærke ét rør, ligger sonden sandsynligvis i luft-røret – tag den ud og prøv igen.

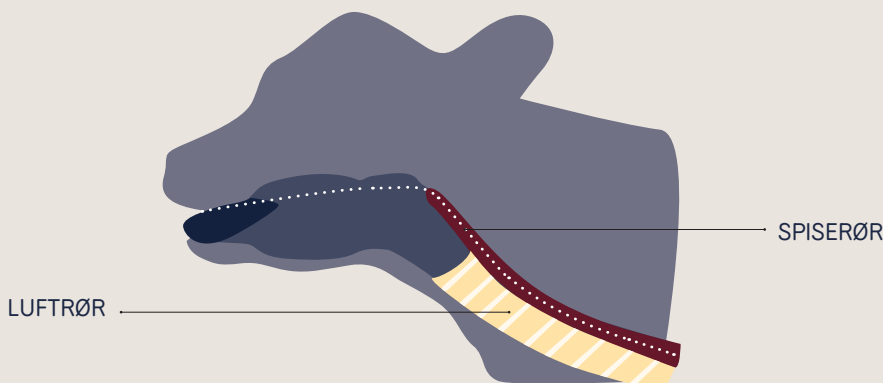



Under sondefodringen

- Lad væsken løbe langsomt ind. Hold ikke beholderen for højt oppe.
 - Kalvens mave skal have tid til at udvide sig.
- Hvis du mister kontrollen over kalven:
 - Stop straks væsken ved at lukke for slangen eller knække den.
 - Ret kalven op og begynd forfra.

Når du er færdig

- Vent med at trække sonden ud, til alt væske er løbet igennem.
- Luk for slangen inden du trækker sonden ud.
- Rengør og desinficér sonden med det samme.

Rengøring af sonden

1. Indret dit kalvekøkken, så det er let at vaske sonden hygiejnisk
2. Vask sonden med lunken vand med sæbe fx opvaskemiddel.
Brug en rørrensner til sondeslangen.
3. Skyl grundigt med lunken vand.
4. Tøm slangen helt for vand.
5. Desinficér med klorholdigt desinfektionsmiddel.
6. Hæng sonden til tørre eller opbevar den i fryseren til næste brug.
7. Udskift slangen/sonden efter behov (den holder ikke evigt)

**Se også denne
video om korrekt
sondebrug**



EVIDENSBASERET KALVERÅDGIVNING – HVOR VIDEN OG PRAKTIK MØDES

Denne protokol er en del af projektet "Evidensbaseret kalverådgivning – formidling af forskningsresultater til kalverådgivere" som er støttet af Kvægafgiftsfonden og Mælkeafgiftsfonden. Baggrunden for projektet er et stadig stigende krav fra kvægbruget til rådgiveren om effektiv og dokumenteret rådgivning. Dette projekt gør det muligt, i en travl hverdag, at tilegne sig og udbygge sin viden om kalvepasning, sundhed og velfærd.

